

別売品

排液バック（ワンタッチコネクタ）



① HB-1000C 1000mL
② HB-1800C 1800mL

ハマコネクティングチューブ



① HCT-015C 大コネクタ ※1.3mと1.8mの2サイズがあります。
② HCT-025C 小コネクタ ※1.3mのみ

排液バック（竹の子コネクタ）



① HB-1000 1000mL
② HB-1800 1800mL

ハマコネクティングチューブ



① HCT-015 大コネクタ ※1.3mと1.8mの2サイズがあります。
② HCT-025 小コネクタ ※1.3mのみ

本体接続チューブ



① CN-3000C
② PV-3000C（逆流防止付き）
③ CN-3000T（竹の子用）

逆流防止弁



PV-02

シールキャップ、プラグ



① HBCA-01 シールキャップ（廃棄用）
② HBPA-01 シールプラグ（廃棄用）

モノメータ



HPC-99C
（標準付属品を含む）
吸引圧の確認に使用できます。

トラップボトル、フィルタ



① TWF-301
トラップボトル + フィルタセット
② TPF-201
トラップフィルタ（5本入）

架台





ST-3KS
SD-3000用
※ガードル台は付属しておりません。

ボンベホルダー



ST-3000G
500リッターボンベが収納できます。
※ガードル台・サーボドレインは
付属しておりません。

動作原理

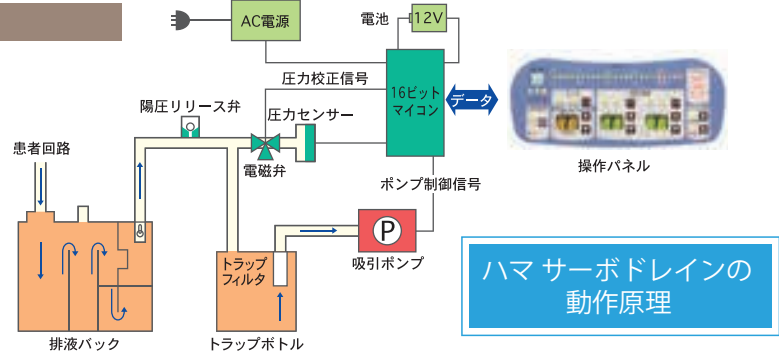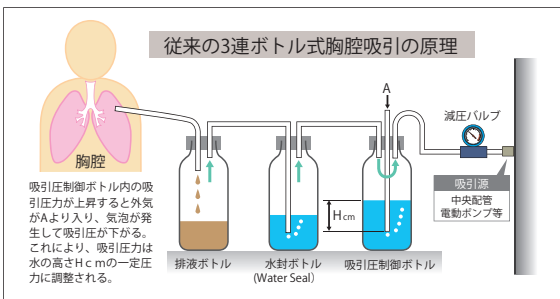

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

主な仕様／規格

品名	ハマサーボドレイン3000
型式	SD-3000
一般名称	電動式低圧吸引器 JMDN 34860020
外観寸法	230×400×240mm（幅×高さ×奥行）
重量	約2.9kg
機器分類	クラスⅠ、B形機器、電池動作時 内部電源機器
定格電圧	AC100V±10V 50／60Hz
電池電源	DC12V ニカド充電電池（SD-3000専用）
消費電力	30VA以下
電池運転時間	フル充電後約150分 作動条件：－20cm H ₂ O、リーク状態
充電時間	約4時間
医療機器承認番号	22100BZX00857000
医療機器クラス分類	管理医療機器 クラスⅡ 非特定保守管理医療機器
EMC	JIS T 0601-1-1 2002 医療機器に対する EMC 要求に適合

吸引圧設定	胸腔モード	－3～－24cm H ₂ O
	消化器モード	－3～－99cm H ₂ O
間欠吸引時間設定	吸引時間	1秒～99秒または1分～99分
	休止時間	1秒～99秒または1分～99分
吸引圧力表示	胸腔モード	－1cm H ₂ O から－24cm H ₂ O まで －1cm H ₂ O 毎のバーグラフ表示
	消化器モード	－24cm H ₂ O までは、胸腔モードの表示と同じ、 －25cmH ₂ O から－99cmH ₂ O までは －5cmH ₂ O 毎のバーグラフ表示
	リーク	胸腔モードで、吸引圧力が設定吸引圧力の 50%以下になった状態が10秒以上続いた 場合に警報音とランプ表示
アラーム	過剰陰圧	吸引圧力が設定吸引圧力の150%以上になった 状態が10秒以上続いた場合にランプ表示
	電圧低下	電池運転のとき電池電圧低下を警報音とランプ表示
アラーム音	一時消音	警報音が発生中に押すと20秒間警報音を停止
	消音	警報音が鳴らない、ランプ表示のみ

本体セット内容

品名	数量
1. 本体（SD-3000）	1
2. 専用電源コード（3P）	1
3. 接続チューブ ワンタッチコネクタ用（CN-3000C）	1
4. 接続チューブ 竹の子用（CN-3000T）	1
5. チューブ離脱鉗子	1
6. 取扱説明書	1

INNOMEDICS

医療機器承認番号 22100BZX00857000

EMC適合

胸腔低圧持続吸引／消化器の連続・間欠吸引

電動式低圧吸引器

ハマサーボドレイン3000
HAMA Low Pressure-Maintained Drainage System



明日の医療を支えるために
株式会社 イノメディックス

本社 〒112-0002 東京都文京区小石川4-17-15
お問合せ先 〒338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里5-22-2
販売促進グループ TEL.048-815-7070
製造販売元 〒338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里5-22-2
TEL.048-822-7661 FAX.048-822-7680
ホームページ <http://www.innomedics.co.jp>

代理店

さらなる進化を遂げた NEW サーボドレイン

経験とノウハウを生かした改良点により
サーボドレインは生まれ変わりました。

1

操作パネルを上面に配置し、
操作性が向上しました。

機能別にすっきり区分けされた
スイッチで設定も簡単にできます。



(全点灯状態)

2

バーグラフはエンボス
(立体的加工)により
視認性とデザイン性が
向上しました。



3

吸引回路の交換が容易に
出来るようになりました。



4

トラップボトルの
確認が前面より
可能になりました。



5

吸引口と排液バックの
取り付け、取り外しに便利な
ワンタッチコネクタを採用し、
確実な作業が可能になりました。



6

軽量(2.9kg)かつコンパクトに
なりました。
(従来品より1kg 軽量化しました。)

その他


- 充電電池での運転時間が 60 分から 150 分へと大幅に長くなりました。(フル充電後)
- 充電時間が12 時間から約 4 時間へと大幅に短縮されました。
- 誤接続防止を考慮したワンタッチコネクタを踏襲しました。
- 本体の色はピンクとグリーンの 2 色から選べます。(性能は変わりません)
- 架台は全面的に改良しました。オプションで「酸素ボンベホルダー」が搭載できます。



安心感と利便性を考えた排液バック。

排液バック
(ワンタッチコネクタ)
誤接続防止に配慮した
コネクタの配置と
しました。

メモなどが記入でき
る「白色プリント」を
採用しました。

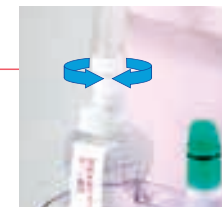

ワンタッチで本体と接続で
き、排液バックの取り外し
も容易です。コネクタのロ
ック機構により確かな接続
が可能です。

コネクタの回転機構により
チューブのねじれがなく、
ロック機構により不用意な
抜けを防止します。



INNOMEDICS

胸腔低圧持続吸引／消化器の連続・間欠吸引 ハマサーボドレイン

SERVO-DRAIN SD-3000